

GLC-3000AP

CP (SISTEMA DE GRÁFICOS
POLARIZADOS CIRCULARES)

LP (SISTEMA DE GRÁFICOS
POLARIZADOS LINEAL)



Alfabeto



Número



Anillo Landolt



Niños (LEA)



Niños (figura Allen)



Niños (tradición)



E's Snellen

Los gráficos de VA más grandes para baja visión

Para el paciente con baja visión, proporciona niveles de VA de 0,03,0,05 y 0,07 en todo tipo de optotipos de VA.



Para el paciente que tiene post-lasek o cualquier otra enfermedad oftálmica, permite una prueba de la vista excluyendo el brillo u otro factor.



Tabla de visión en color de alta resolución

Proporciona 25 hojas de gráficos de visión en color convertidos a partir de imágenes vectoriales. También puede ayudar a detectar una gravedad y una identificación falsa, así como la identificación normal de los gráficos.




La función Fan & Block permite obtener un eje astigmático preciso de los pacientes.



Puede mostrar gráficos aleatorios en el mismo nivel de agudeza para prevenir el problema de memoria del paciente y volver a hacer la prueba en caso de



El gráfico de cuadrícula de AMSLER permite un diagnóstico conveniente de la enfermedad de la retina.

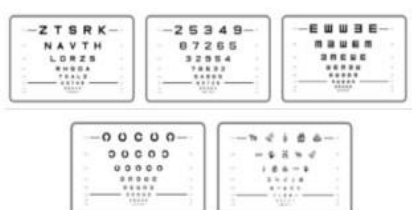

Proporciona los cinco tipos de gráficos ETDRS con gráfico de aleatorización y función inversa de pantalla para permitir una prueba precisa.



En la prueba de la vista de niños y pacientes con otras enfermedades oftálmicas, ofrece la función de cubrir letras con barras de interacción para excluir la distinción entre la distancia concentrada de las letras para la concentración de optotipos.




Tiene una función que puede ajustar 10 pasos de contraste del 100% al 1,5% para ser útil para una prueba de sensibilidad al contraste y refracción de pacientes quirúrgicos.



Para el paciente que tiene post-lasek o cualquier otra enfermedad oftálmica, permite una prueba de visión excluyendo evidente u otro factor.



Proporciona la función de si el paciente identifica los tres colores. Este método se puede aplicar por el juicio del operador.

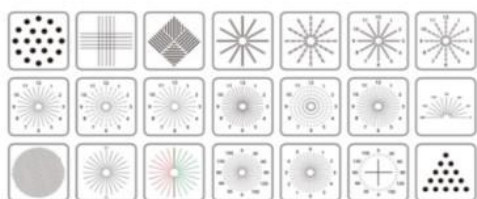

Para una prueba astigmática precisa y conveniente, ofrece 21 tipos de tablas de prueba astigmática.

Básicamente proporciona comunicación inalámbrica usando luz infrarroja y comunicación por cable mediante RS- protocolo 232.

Usando esta función, se puede usar con otros dispositivos como el refractor digital fabricado por otros fabricantes. Para ello, consulte con el fabricante o distribuidor local.

- Incluye varias pruebas dinámicas polarizadas, basado en parámetros y distancia.
- Todas las pruebas polarizadas se muestran en un built-in modo polarizado.


Proporciona cuatro tipos de unidades como abajo, y muestra la unidad de medida optimizado para identificar con facilidad.

- Las pruebas binoculares se muestran con positiva polarización a través de una pantalla LCD especial: a solución única para monocular y pruebas de visión binocular.

- La polarización es lineal 45 ° / 135° (el tipo circular es también disponible) - Los gráficos polarizados se pueden usar con las gafas polarizadas o con los forópteros lentes polarizadas, como prefieras.

Las pruebas binoculares, en particular, se pueden hacer con la carta polarizada del LCD más con eficacia que con gafas no polarizadas, mientras usa gafas Pola.

Medidor	Pies	Decimal	logMAR
6/200	20/660	0.03	1.5
6/120	20/400	0.05	1.3
6/85	20/300	0.07	1.15
6/60	20/200	0.1	1.0
6/48	20/150	0.15	0.8
6/40	20/100	0.2	0.7
6/36	20/90	0.3	0.5
6/30	20/80	0.4	0.4
6/24	20/70	0.5	0.3
6/21	20/60	0.6	0.2
6/18	20/50	0.7	0.15
6/15	20/40	0.8	0.1
6/12	20/30	0.9	0.05
6/9	20/20	1.0	0
6/7.5	20/20	1.0	-0.1
6/6	20/15	1.5	-0.2
6/4.5	20/10	2.0	-0.3

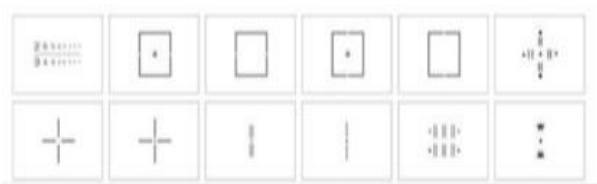

Muestra a los pacientes los ejemplos que pueden explicar los errores refractivos diversificados, tales como miopía, hipermetropía y astigmatismo. Es posible reproducir video o imágenes almacenadas en la memoria interna o unidad USB. Se puede realizar en pantalla modo ahorro.